

**Side-effects:**

With proper use of this medical device, un-wanted side-effects are extremely rare. Reactions of the immune system (allergies) or local discomfort, however, cannot be ruled out completely. Should you learn about unwanted side-effects – even if it is doubtful that the side-effect has been caused by our product – please kindly contact us.

**Contra-indications/interactions:**

If a patient has known allergies against or hypersensitivities towards a component of this product, we recommend not to use it or to do so only under strict medical supervision. The dentist should consider known interactions and crossreactions of the product with other materials already in the patient's mouth before using the product.

**Storage:**

Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight.

Packages: Syringe 2 ml

**Attention:**


The product is designed for onetime use. When reusing the product the functionality cannot be guaranteed and a high risk of infection occurs.

**Medical device**

 GDF GmbH  
Dieselstr. 5-6, 61191 Rosbach/Germany



Distributor: Hager & Werken GmbH & Co. KG  
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg, Germany  
[www.hagerwerken.de](http://www.hagerwerken.de) • [www.miradent.de](http://www.miradent.de)

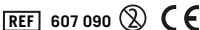

2012121103 RevA (2019-05)

## Mirawhite® After Bleaching Care

### Gebrauchsanleitung

**Beschreibung:**

After Bleaching Care ist eine wasserbasierte Creme, die nach dem Bleaching der Zähne für Remineralisierung und Desensibilisierung sorgt. Angenehmes Pfefferminzaroma.

**Indikation:**

Professionelle Anwendung: Unmittelbar nach dem Bleaching.

**I. Anwendung mit Mirafleur Löffel:**

1. After Bleaching Care in den Löffel geben und diesen auf den Ober- und Unterkiefer applizieren.
2. Den Löffel mindestens 3 Minuten im Mund des Patienten lassen.
3. Den Löffel entfernen.
4. Bitten Sie den Patienten den Mund gut zu spülen. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder Essen oder Trinken.

**II. Anwendung ohne Löffel:**

1. Wenn nötig, überflüssigen Speichel von den Zahnoberflächen abtupfen.
2. Eine großzügig bemessene Menge After Bleaching Care mit einem Einmalpinsel, Handschuh oder in schwierigen interproximalen Situationen einer Interproximalbürste auf der Zahnoberfläche verteilen.
3. After Bleaching Care für mindestens 3 Minuten im Munde des Patienten lassen.
4. Bitten Sie den Patienten den Mund gut zu spülen. Der Patient soll frühestens 30 Minuten nach der Behandlung wieder Essen oder Trinken.

**Nebenwirkungen:**

Unerwünschte Nebenwirkungen dieses Medizinproduktes sind bei sachgemäßer Verarbeitung und Anwendung äußerst selten zu erwarten.

Immunreaktionen (z.B. Allergien) oder örtliche Missempfindungen können prinzipiell jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. Sollten Ihnen unerwünschte Nebenwirkungen – auch im Zweifelsfall – bekannt werden, bitten wir um Mitteilung.

#### Gegenanzeigen/Wechselwirkungen:

Bei Überempfindlichkeiten des Patienten gegen einen der Bestandteile darf dieses Produkt nicht oder nur unter strenger Aufsicht des behandelnden Arztes/Zahnarztes verwendet werden. Bekannte Kreuzreaktionen oder Wechselwirkungen des Medizinprodukts mit anderen bereits im Mund befindlichen Werkstoffen müssen vom Zahnarzt bei der Verwendung berücksichtigt werden.

#### Aufbewahrung:

An einem kühlen und trockenen Ort geschützt vor direktem Sonnenlicht. Enthält Xylit, Kaliumnitrat, Natriumfluorid, Verdicker, Glycerin, Aromastoffe. Beachten Sie das Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung.

Packungsgrößen: Spritze 2 ml

#### Hinweis:

Das Produkt ist zur einmaligen Anwendung bestimmt. Bei einer Wiederverwendung ist die Funktion des Produktes nicht gewährleistet und es besteht hohe Infektionsgefahr.

#### Medizinprodukt

 GDF GmbH  
Dieselstr. 5-6, 61191 Rosbach/Germany



Vertrieb: Häger & Werken GmbH & Co. KG  
Ackerstr. 1, 47269 Duisburg, Germany  
[www.hagerwerken.de](http://www.hagerwerken.de) • [www.mikradent.de](http://www.mikradent.de)



REF 607 090



## Mirawhite® After Bleaching Care

### Instructions for use

#### Description:

After Bleaching Care is a water-based cream for remineralization and desensitization after the bleaching process. Pleasant peppermint flavor.

#### Directions for use:

Professional application: immediately following surgery bleaching.

#### I. Mirafluor tray application:

1. Extrude a generous layer of After Bleaching Care into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
2. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
3. Remove the tray.
4. Ask the patient to rinse any After Bleaching Care remaining on the surface. Any residual After Bleaching care can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

#### II. Non tray application:

1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a cotton roll or pellet.
2. Apply a generous layer of After Bleaching Care to the tooth surfaces using an application swab, gloved finger or difficult interproximal areas using an Tooth Cleaning Brush.
3. Leave After Bleaching Care undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Ask the patient to rinse any After Bleaching Care remaining on the surface. Any residual After Bleaching Care can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.