

# Bambach®



## BamBasic®

### DE Kurzanleitung

1. Rote Schutzkappe von der Gasdruckfeder entfernen.
2. Gasdruckfeder in das Fußkreuz stecken.
3. Sitzfläche fest auf die Gasdruckfeder stecken.
4. Funktion des Hebels für die Höhenverstellung testen.

Reinigung mit milder Seifenwasserlösung und anschließend trocken wischen.  
Flecken oder Flüssigkeiten sofort entfernen.  
Sitzfläche kann mit alkoholbasierten Lösungen (<10% Vol) desinfiziert werden. Keine Bleich- oder Lösungs- oder Scheuermittel benutzen.

### FR Guide rapide

1. Retirez le capuchon de protection rouge du piston à gaz.
2. Insérez le piston à gaz dans la base du siège.
3. Enclenchez fermement l'assise sur le piston à gaz.
4. Testez la fonction du levier pour le réglage de la hauteur.

Nettoyez avec une solution d'eau savonneuse douce, puis essuyez à sec. Enlevez immédiatement les taches ou les liquides.  
La surface du siège peut être désinfectée avec des solutions à base d'alcool (<10% vol). N'utilisez pas d'eau de Javel, de solvants ou d'abrasifs.

### EN Quick guide


1. Remove the red protective cap from the gas spring.
2. Insert the gas spring into the base.
3. Firmly place seat top onto the gas spring.
4. Test the lever function for height adjustment.

Clean with a mild soapy water solution and then wipe dry. Remove stains or liquids immediately.  
Seat surface can be disinfected with alcohol-based solutions (<10% vol). Do not use bleach, solvents, or abrasives.

### ES Instrucciones breves

1. Retira la tapa roja de protección del pistón de gas.
1. Inserta el pistón de gas en la base de la silla.
1. Encaja el asiento firmemente en el pistón de gas.
1. Prueba la función de la palanca para ajustar la altura.

Limpie con una solución de agua jabonosa suave y luego seque con un paño. Elimine manchas o líquidos de inmediato.  
La superficie del asiento se puede desinfectar con soluciones a base de alcohol (<10% vol). No utilice lejía ni disolventes ni abrasivos.

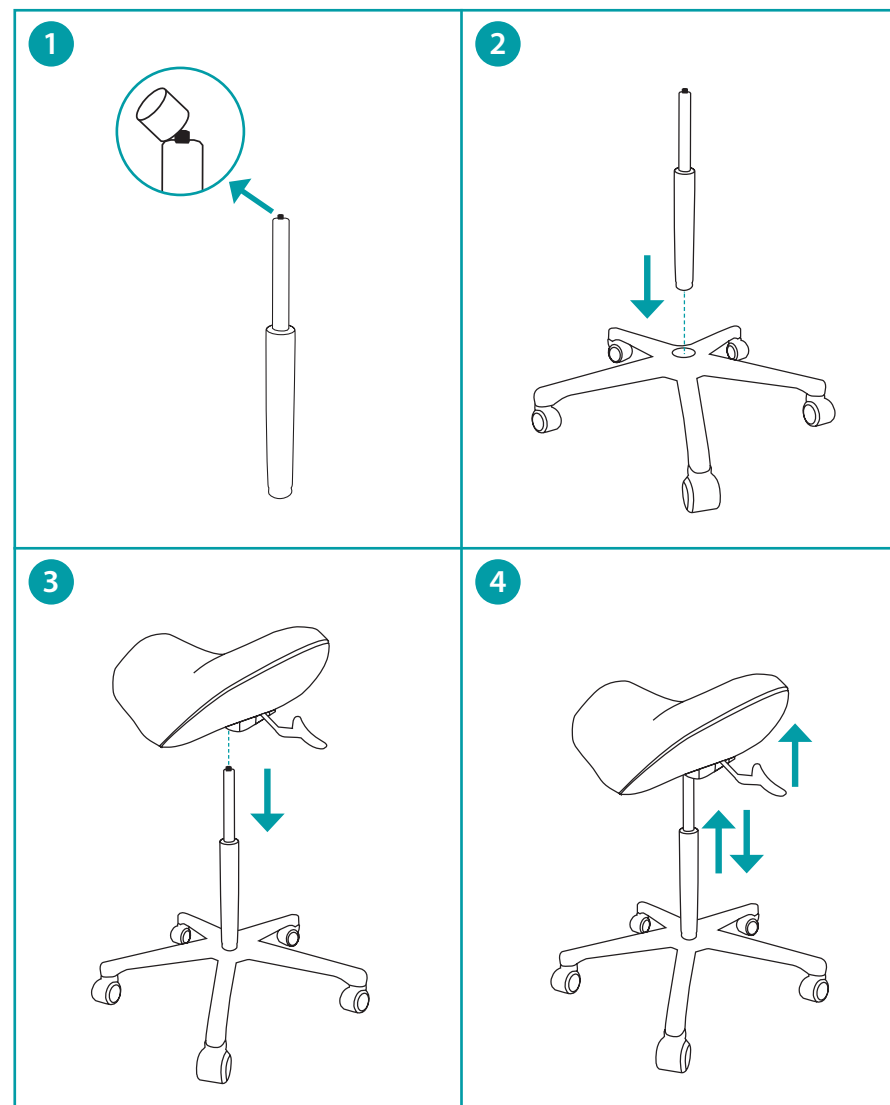

REF B601501



Hager & Werken GmbH & Co. KG · Ackerstraße 1, 47269 Duisburg  
Tel. +49 (203) 99269-0 · Fax +49 (203) 299283 · www.hagerwerken.de · info@hagerwerken.de